

ARES 620



Prueba de Sueño en Casa

Guía del Paciente



Si tiene preguntas
o inquietudes,
comuníquese con
nosotros al
877-753-3776,
Opción 5

Diagrama del dispositivo ARES

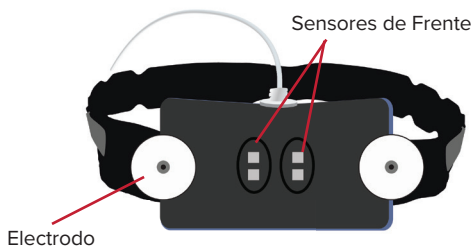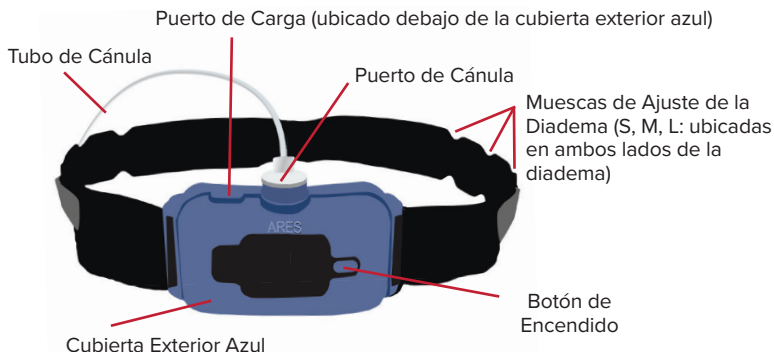

ESPAÑOL

Encuentra Esta Guía en Español
ReactDx.com/es/GuiaARES

Información Importante

¡Gracias por realizar la prueba de sueño en casa ARES!

Esperamos poder ayudarle durante el proceso de prueba. Comience la prueba tan pronto como reciba el dispositivo.

Por favor, siga las instrucciones y póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta en **1-877-753-3776**.

Estamos disponibles de 8am a 2am (EST) / 5am a 11pm (PST) para brindar asistencia al paciente. Una vez que haya completado el estudio del sueño, deberá devolvérnoslo inmediatamente el ARES según se indica en las instrucciones adjuntas.

Si no devuelve el dispositivo en un plazo de 7 días, se le cobrará un recargo por demora de \$15 por día hasta 10 días o \$150. Después de 10 días, consideraremos que el dispositivo se perdió y se le cobrará un costo de reemplazo de \$500*.

Gracias por elegir realizar la prueba de sueño ARES. Esperamos trabajar con usted para que sus resultados lleguen a su proveedor lo más rápido posible.

Por favor llame al 911 si tiene una emergencia médica.

Asistencia al Paciente

Si falta alguna pieza o siente que la unidad no funciona correctamente, llame inmediatamente al servicio de atención al cliente de ReactDx: 1-877-753-3776.

El ARES es un dispositivo no estéril. El módulo del paciente del ARES es un dispositivo reutilizable que ReactDx limpia y reprocesa después de cada uso con un paciente.

Estos materiales son propiedad de ReactDx.

Precauciones y Advertencias

- ARES no se puede utilizar simultáneamente con una máquina CPAP u otros sistemas de suministro de oxígeno.
- ARES es un producto que se vende solo con receta médica. Solo debe utilizarse bajo la supervisión de un proveedor de atención médica autorizado.
- ARES no está diseñado para usarse con bebés o niños.
- ARES no es un monitor de apnea y solo registra los sonidos respiratorios, el oxígeno en sangre y el esfuerzo respiratorio.
- ARES no tiene alarmas y no debe usarse como monitor.
- No use un cable de extensión para enchufar el dispositivo mientras esté en el paciente.
- No use cerca de la unidad, ni coloque ni deje caer agua u otro líquido sobre ella.
- Debe usarse en un rango de temperatura de funcionamiento: de 32 a 104 °F (0 a 40 °C).

No exponga ni permita que el ARES entre en contacto con líquidos, humedad o calor extremo.

*Esta política no se aplica a ningún programa de Medicaid, TriWest o Veteran Administration, ni a ningún paciente que se esté evaluando como parte de un ensayo clínico.



COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

BioSerenity USA, Inc. dba ReactDx está acreditada por la Comisión de Acreditación para la Atención Médica (ACHC) por cumplir con un conjunto integral de estándares nacionales. Al elegir un proveedor de atención médica que haya obtenido la acreditación de la ACHC, puede estar tranquilo sabiendo que recibirá la más alta calidad de atención. Si tiene alguna inquietud sobre el producto o servicio que recibe de ReactDx, puede comunicarse directamente con la ACHC al 855-937-2242.


Contenido del kit ARES




Dispositivo ARES con
Cánula Nasal



Cinturón de Pecho
(opcional)

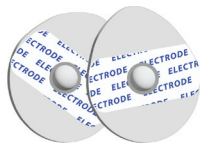

Electrodos Adicionales
(opcionales)

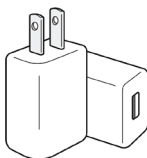

Adaptador de
Pared USB



Cable de Carga



Toallitas con Alcohol



Manual de Usuario



Formulario de autorización/
consentimiento del paciente
y cuestionario para la prueba
del sueño en el hogar


Tabla de Contenido

Diagrama del dispositivo ARES	i
Información Importante.....	ii
Contenido del kit ARES	iii
Tabla de Contenido.....	1
Antes de Empezar	2
Configuración de ARES.....	3
Ajuste la cánula	4
Comience su Estudio del Sueño	4
Por la Mañana	5
Preguntas Frecuentes	6
Regreso de ARES.....	7
Devuelva el Kit por Correo.....	8



Para consultar el Aviso de prácticas de privacidad, los derechos y responsabilidades de los pacientes y la asignación de beneficios/consentimiento del paciente de ReactDx, visite www.ReactDx.com/Notices.
Si desea una copia escrita, llame al (877) 996-5553


Antes de Empezar

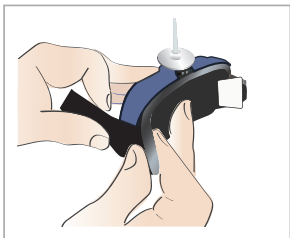


- 1** Cargue el dispositivo antes de realizar la prueba utilizando el adaptador de pared USB incluido.

Quita la cubierta exterior azul e inserta el cable de carga en el puerto que se encuentra en la parte superior del dispositivo.

La pantalla de ARES indicará que el dispositivo se está cargando. Carga el dispositivo durante 5 horas o hasta que la imagen de la batería en la pantalla deje de parpadear, lo que indica que la carga está completa.

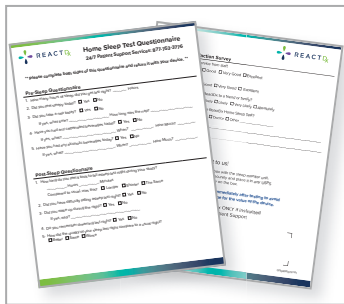


- 2** ****REQUERIDO**** Complete el Cuestionario de prueba de sueño en el hogar y la Autorización para la prueba de sueño en el hogar.

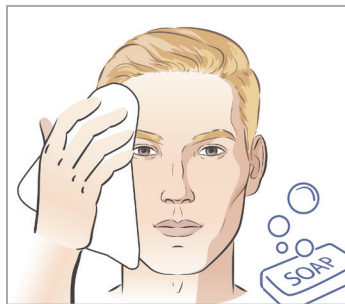


- 3** Lávese y séquese bien la frente. Mantenga esta zona limpia y seca antes de colocarse el dispositivo. Limpie su frente con la toallita con alcohol incluida.


Configuración de ARES

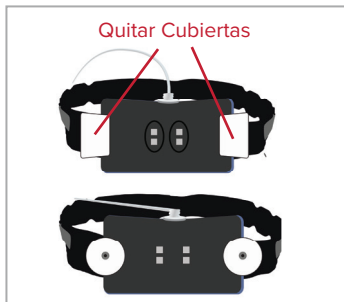


1 Retire las cubiertas protectoras de cada electrodo.

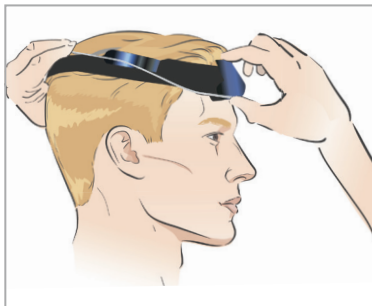

2 Sujete las puntas nasales de la cánula contra la parte inferior del ARES con el pulgar. Con la otra mano, estire la banda para la cabeza y coloque suavemente el dispositivo sobre su cabeza, como si se pusiera una gorra de béisbol.

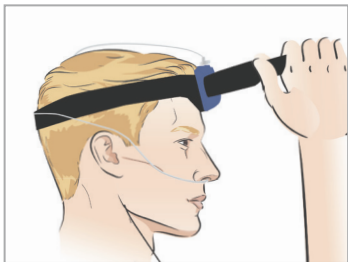

3 Ajuste la correa para la cabeza usando una o ambas correas ajustables del lado izquierdo o derecho. Retire el cabello que haya debajo del sensor.

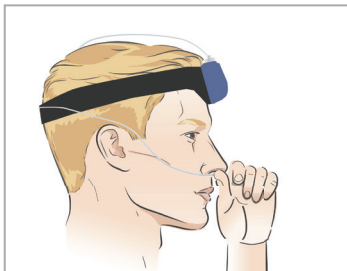

4 Coloque las puntas de la cánula dentro de las fosas nasales.

Ajuste la Cánula



Tubo de deslizamiento

Sostenga el tubo de la cánula y tírelo suavemente de la parte posterior de su cabeza hasta que las puntas nasales encajen perfectamente en sus fosas nasales.

Con la otra mano, sujete el tubo deslizante y tire de él hacia la parte posterior de la cabeza hasta que quede bien sujeto.

El tubo deslizante debe quedar ajustado sobre la parte posterior de la correa para la cabeza. Cuando está bien ajustado, la cánula no se puede separar de la nariz.

Comience su Estudio del Sueño




Botón de encendido

Encienda el ARES presionando el botón de encendido en la parte frontal. Sonará una alerta de audio para informarle que el ARES está encendido.


Después de 10 segundos, sonará una alerta de audio para indicar que el período de inicio ha finalizado. Ahora puede cambiar de posición e irse a dormir.

- I** El ARES está programado para proporcionar alertas de voz cuando la recopilación de datos se interrumpe durante el estudio debido a que
- la cánula nasal se cae o el ARES se mueve en la frente. Para reanudar la captura de datos, vuelva a colocar la cánula nasal o vuelva a colocar el ARES.
- 4

Por la Mañana

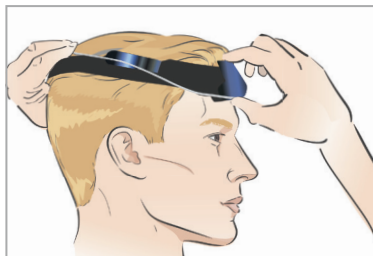

- 1** Retire con cuidado el ARES quitando primero la correa para la cabeza y luego tirando de ella hacia afuera de la frente.

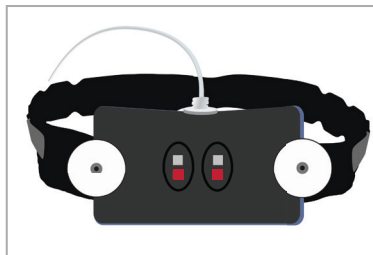

- 2** Si los sensores rojos de la frente aún están iluminados, apague su ARES presionando el botón de encendido hasta que la pantalla muestre “SLEEP STUDY HALTED”

Preguntas Frecuentes

¿Podré dormir con el ARES en la frente?

- Puede que al principio te parezca extraño, pero la mayoría de las personas no lo encuentran incómodo ni un obstáculo para conciliar el sueño.

¿Necesito dormir boca arriba?

- No. Puedes dormir en la posición que te resulte más cómoda.

¿Puedo dormir con la televisión o el ventilador de techo encendido en la habitación?

- Si es posible, evite utilizar cualquier cosa que genere ruido ambiental durante el estudio del sueño.

¿Qué pasa si tengo que levantarme en mitad de la noche?

- Deja el dispositivo encendido y grabando si te levantas en mitad de la noche. Vuelve a la cama cuando estés listo.

¿Cuántas horas o días necesito dormir con el ARES?

- Intente dormir al menos 6 horas cada noche, durante dos noches.

Si tiene alguna pregunta, llame a ReactDx al 1-877-753-3776.

¿Puedo tomar medicamentos?

- Sí. Tome sus medicamentos como de costumbre.

¿Puedo ducharme con el ARES?

- No. El dispositivo no se puede mojar.

El soporte al paciente está disponible de 8am a 2am (EST) / 5am a 11pm (PST), llame al:

1-877-753-3776

Presione la opción 5 para obtener ayuda.


Regreso de ARES

Coloque el dispositivo ARES y los documentos completos (cuestionario del paciente, autorización para pruebas de sueño en el hogar) en la caja de envío original.


Sella la caja y colócala en cualquier buzón de USPS para devolverla a ReactDx.

Lista de verificación de devolución:

- ☐ Dispositivo ARES
- ☐ Cinturón de Pecho (si está incluido)
- ☐ Adaptador de Pared
- ☐ Cable de Carga
- ☐ Cuestionario de Prueba del Sueño en Casa
- ☐ Autorización para Pruebas de Sueño en el Hogar

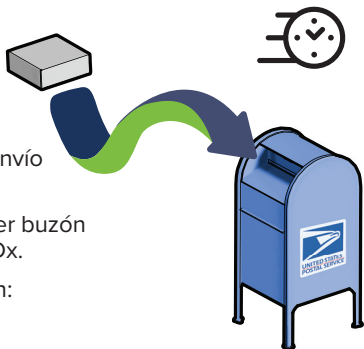


Recuerde incluir el cuestionario del paciente y los formularios de autorización en su paquete de devolución a ReactDx.

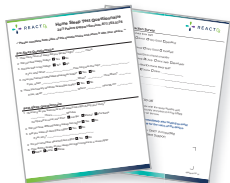

Devuelva el Kit por Correo

Devuelva su kit lo antes posible para que su médico pueda finalizar el estudio. Los dispositivos no devueltos podrían demorar la entrega del informe a su médico y generar una factura por el equipo no devuelto.

Deje su kit sellado en cualquier buzón de USPS para devolverlo a ReactDx.

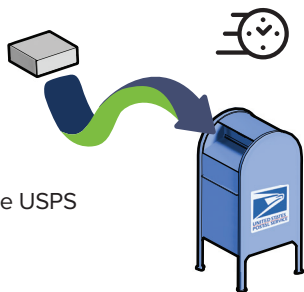

El soporte al paciente está disponible de 8am a 2am (EST) / 5am a 11pm (PST), llame al:

1-877-753-3776, opción 5

Tómese un momento para completar la encuesta en **[ReactDx.com/survey/](https://reactdx.com/survey/)**.

Su aporte nos ayudará a brindarles a los pacientes, como usted, la mejor experiencia posible.



(877) 753-3776 • www.ReactDx.com • Info@ReactDx.com

SM-0170.00.ES